




























## Lime oscillanti diamantate in Conservativa & Intensiv Swingle

Prodotto	Grana	Ref.
Intensiv Swingle con luce		WG-69 LT
Intensiv Swingle senza luce		WG-69 A
<b>Confezionamento da 3 lime</b>		
 Intensiv Proxoshape PS0	125µ	210PS0/3
 Intensiv Proxoshape PS1	90µ	210PS1/3
 Intensiv Proxoshape PS1L	90µ	210PS1L/3
 Intensiv Proxoshape PS50	50µ	210PS50/3
 Intensiv Proxoshape PS50L	50µ	210PS50L/3
 Intensiv Proxoshape PS2	40µ	210PS2/3
 Intensiv Proxoshape PS2L	40µ	210PS2L/3
 Intensiv Proxoshape PS2S	40µ	210PS2S/3
 Intensiv Proxoshape PS3	15µ	210PS3/3
 Intensiv Proxoshape PS3G	15µ	210PS3G/3
 Intensiv Proxoshape PS3L	15µ	210PS3L/3
 Intensiv Proxoshape PS3S	15µ	210PS3S/3
 Intensiv Proxoshape PS9	8µ	210PS9/3
 Intensiv Proxoshape Coarse PSC80	80µ	210PSC80/3
 Intensiv Proxoshape Flexible PSF60	60µ	210PSF60/3
 Intensiv Proxoshape Flexible PSF40	40µ	210PSF40/3
 Intensiv Proxoshape Flexible PSF15	15µ	210PSF15/3
 Intensiv Proxoshape Flexible PSF60L	60µ	210PSF60L/3
 Intensiv Proxoshape Flexible PSF40L	40µ	210PSF40L/3
 Intensiv Proxoshape Flexible PSF15L	15µ	210PSF15L/3
 Intensiv Bevelshape BS40	40µ	209BS40/3
 Intensiv Bevelshape BS25	25µ	209BS25/3
 Intensiv Bevelshape BS15	15µ	209BS15/3
 Intensiv Bevelshape BS40T	40µ	209BS40T/3
 Intensiv Bevelshape BS25T	25µ	209BS25T/3
 Intensiv Bevelshape BS15T	15µ	209BS15T/3




## Lime oscillanti diamantate in Conservativa & Intensiv Swingle

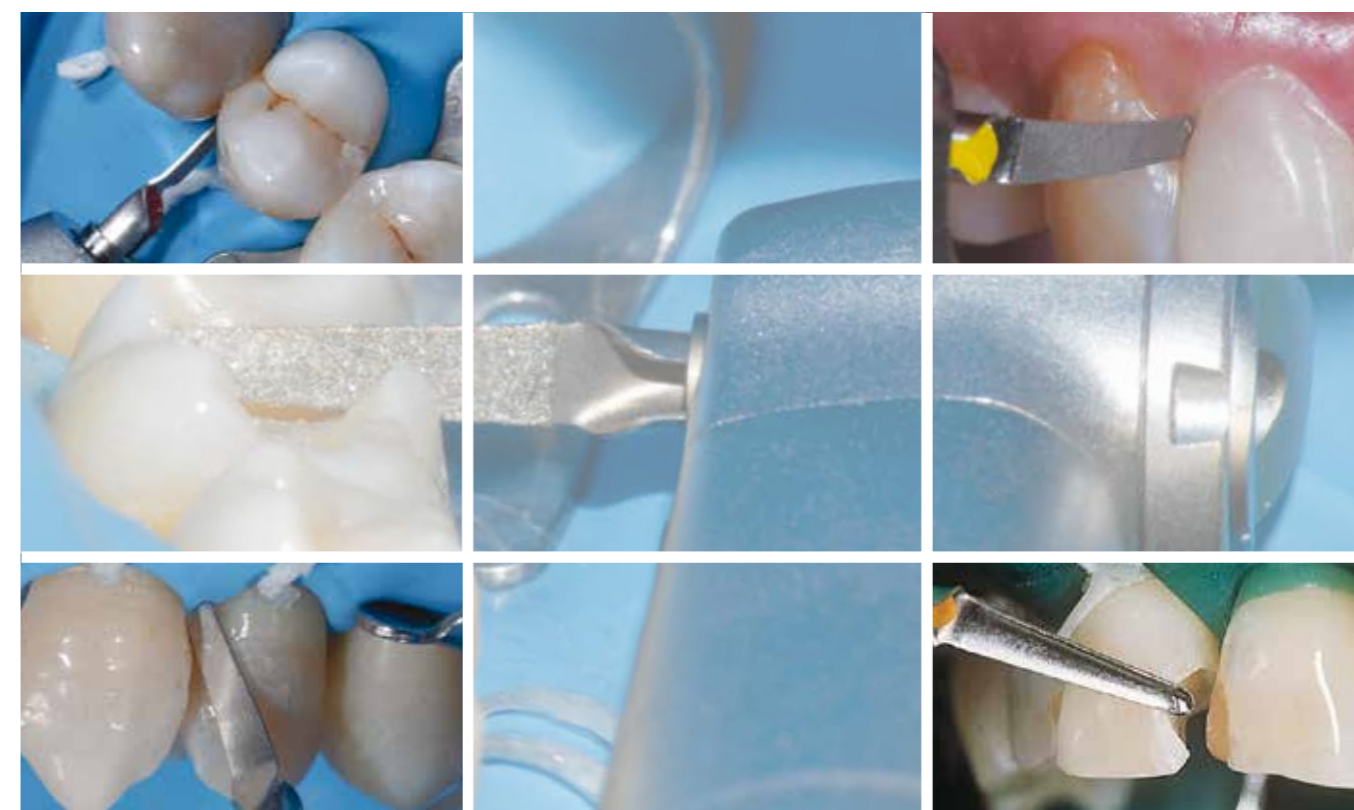

- Nessun danno iatrogeno, rispetto per i tessuti dentali
- Precisione, controllo e sicurezza nei trattamenti

## Intensiv Proxoshape, Proxoshape Flexible, Proxoshape Coarse

Testato clinicamente dalle Università di Zurigo e di Berna, Svizzera

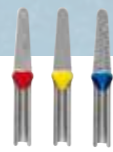

Le superfici dei restauri approssimali e i margini di preparazioni perfettamente lavorati e lucidati costituiscono il presupposto essenziale per preservare la salute del parodonto e prevenire carie secondarie. Con le lime Intensiv Proxoshape è possibile creare le condizioni preliminari per una corretta modellazione delle superfici e dei margini dei restauri. Le forme e gli spessori ideali permettono un adattamento corretto alla morfologia dentale ed un eccellente controllo e sensibilità di lavoro. Il rivestimento diamantato da un solo lato evita lesioni iatrogene ai denti adiacenti e alle gengive.

### Intensiv Proxoshape

- 4 lime diamantate (PS0, PS1, PS2, PS3), per l'eliminazione degli eccessi, la rifinitura e la prelucidatura dei restauri adesivi
- 1 lima diamantata (PS9), per la lucidatura dei bordi di cementazione nelle ricostruzioni in ceramica, anche con sistema Cerec
- 3 lime diamantate con parte lavorante allungata (PS1L, PS2L, PS3L), per l'applicazione nei restauri adesivi con maggiore estensione dentale
- 2 lime diamantate strette (PS2S, PS3S), per l'uso in aree approssimali ridotte
- 1 lima speciale diamantata distalmente (PS3G), per la lucidatura di restauri approssimali in area pre-radicolare

### Intensiv Proxoshape Coarse

- 1 lima diamantata con due file di perforazioni (PSC80), per l'efficiente e rapida rimozione degli eccessi approssimali e la modellazione dei restauri

### Intensiv Proxoshape Flexible

Lime diamantate flessibili e sottili, adatte alla lavorazione delle naturali concavità:

- 3 lime (PSF60, PSF40, PSF15), da utilizzare per l'eliminazione degli eccessi, la rifinitura e la pre-lucidatura dei restauri adesivi approssimali collocati in aree con accesso ridotto
- 3 lime (PSF60L, PSF40L, PSF15L), con parte lavorante allungata per la lavorazione dei restauri con maggiore estensione dentale collocati in aree con accesso molto ridotto

Tutte le lime Intensiv Proxoshape sono disponibili in confezioni da 3 pezzi e in set assortiti.

Intensiv Proxoshape Set, Ref. 210K  
Contenuto 4 lime: PS0, PS1, PS2, PS3


Intensiv Proxoshape Set Optional, Ref. 210KOPT  
Contenuto 10 lime: PS0, PS1, PS2, PS3, PS1L, PS2L, PS3L, PS2S, PS3S, PS3G

Intensiv Proxoshape Flexible Set, Ref. 210KF  
Contenuto 6 lime: PSF60, PSF40, PSF15, PSF60L, PSF40L, PSF15L



Immagine cliniche:

1-3) Università di Zurigo e Berna, Svizzera 4) Dr. Alessandro Devigus, Bülach, Svizzera

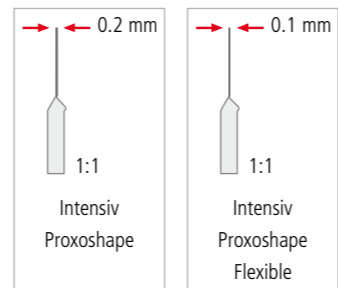


Le lime Intensiv Proxoshape e Intensiv Bevelshape sono utilizzabili in combinazione con:

- Intensiv Swingle (con luce), Ref. WG-69 LT
- Intensiv Swingle (senza luce), Ref. WG-69 A

## Intensiv Bevelshape

Testato clinicamente dall'Università di Berna, Svizzera

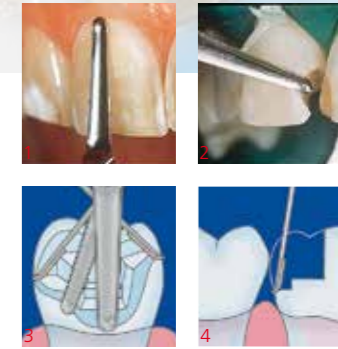

La condizione essenziale per una preparazione ideale di cavità per restauri in composito, per Inlays e Overlays, e dei bordi a chamfer e a spalla in Protesi, consiste nella creazione di margini precisi e ben definiti. L'uso di Intensiv Bevelshape assicura che non vi siano distacchi accidentali di prismi dello smalto e che la superficie dello smalto risulti priva di irregolarità lungo il bordo di preparazione. La diamantatura da un solo lato previene il danno iatrogeno al dente vicino e ai tessuti molli.

Lime diamantate da un solo lato, con leggera curvatura assiale e la punta arrotondata:

- 3 lime diamantate per tutta la parte operativa convessa (BS40, BS25, BS15), per la rifinitura e bisellatura di preparazioni a spalla e dei bordi di cavità per i restauri diretti e indiretti in composito
- 3 lime diamantate unicamente in punta (BS40T, BS25T, BS15T), per la preparazione e la bisellatura delle preparazioni a chamfer, per faccette e per la rifinitura dei restauri di classe V

Tutte le lime Intensiv Bevelshape sono disponibili in confezioni da 3 pezzi e in set assortiti.

Intensiv Bevelshape Set, Ref. 209K  
Contenuto 6 lime: BS40, BS25, BS15, BS40T, BS25T, BS15T


Immagine cliniche:

1-2) Università di Berna, Svizzera



## Intensiv Swingle

Testato clinicamente dalle Università di Zurigo e di Berna, Svizzera

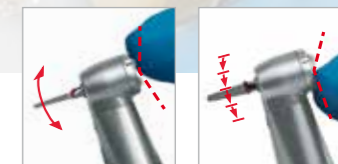

Lima assiale libera

Lima assiale fissa


Intensiv Swingle è un contrangolo a movimento reciprocante che consente l'applicazione di lime oscillanti in Conservativa, Protesi e Ortodonzia (stripping). Dispone di 2 funzioni congiunte: la rotazione assiale libera per la rifinitura e lucidatura, e la posizione assiale fissa per l'eliminazione degli eccessi e la preparazione dei bordi. Il suo utilizzo, in abbinamento alle lime Intensiv, consente l'esecuzione di preparazioni mininvasive precise, una veloce ed efficiente rimozione degli eccessi e la rifinitura e lucidatura dei restauri approssimali.

- Contrangolo dotato di sistema spray e luce integrata
- Movimento oscillatorio da 0.9mm
- 20'000 oscillazioni con 40'000 rpm/minuto
- Con interruttore a scatto per scegliere tra posizione assiale libera o assiale fissa delle lime
- 12 posizioni assiali fisse (ogni 30° su 360°)
- Dotato di espulsore per l'estrazione della lima e di pulitore per l'ugello d'irrigazione
- Intensiv Swingle ha due anni di garanzia
- Disponibile in due versioni:  
Con luce, Ref. WG-69 LT  
Senza luce, Ref. WG-69 A

Nei trattamenti dei restauri approssimali la prestazione più performante è garantita dalla combinazione di:



Intensiv Swingle, portato ad un numero massimo di 40'000/rpm Min (=20'000 oscillazioni)

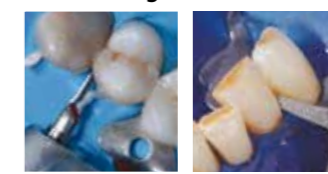

Pressione massima fino a una leggera curvatura della lima



La granulometria della lima selezionata per il trattamento specifico